

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.



## Buttress Support Instructions for Use

## Soporte de refuerzo Instrucciones de uso

## Genouillère de renfort Mode d'utilisation




2885 Loker Ave East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
Toll Free Tel: 1-800-321-0607  
Local: +1-760-795-5440  
Fax: +1-760-795-5295  
www.breg.com

© 2017 Breg, Inc. All rights reserved.



E/U authorized representative  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

1

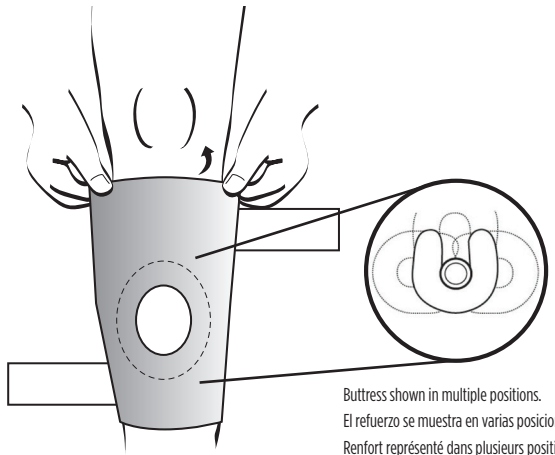

Buttress shown in multiple positions.  
El refuerzo se muestra en varias posiciones.  
Renfort représenté dans plusieurs positions.

**1. Apply to Knee**

Grasp edges of the sleeve at the larger opening. Step through sleeve, pulling it up to the knee so that the opening at the front surrounds the knee cap.


**1. Colocar en la rodilla**

Tomar los bordes de la manga por la abertura más grande. Pasar la pierna por la manga, jalándola hasta la rodilla de modo que la abertura en el frente rodee la rótula.

**1. Posez autour du genou**

Saisissez les bords du manchon par la plus grande ouverture. Passez la jambe par le manchon, en tirant vers le haut jusqu'à ce que l'ouverture pour le genou soit centrée sur la rotule.

2

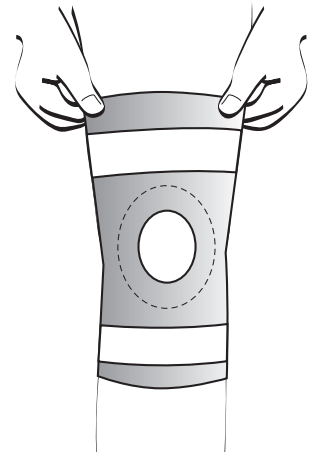

**2. Secure Straps**

Starting with the lower strap, feed straps through the D-rings and secure. Fit should be snug but not too tight so as to restrict circulation.

**2. Asegurar las correas**

Comenzando con la correa inferior, hacer pasar las correas por los anillos en forma de D. El ajuste debe ser apretado, pero no demasiado ajustado como para restringir la circulación.

**2. Attache des sangles**

Commencez par la sangle inférieure, faites passer les sangles par les anneaux en D et attachez. Ajustez correctement, sans trop serrer pour éviter de restreindre la circulation.

**CARE & WASHING INSTRUCTIONS**

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



**LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO**

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



**INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE**

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

