

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.




# Elbow Sleeves Instructions for Use

## Mangas Instrucciones de Uso Supports à coude Mode d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
[www.breg.com](http://www.breg.com)

1

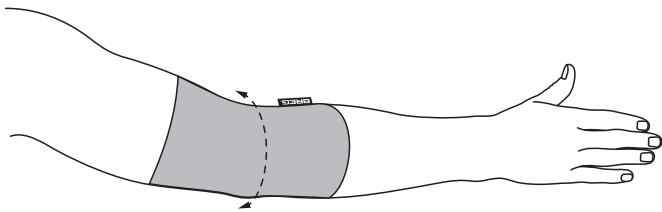


Insert arm into sleeve, ensuring the seam is centered on the inside of the arm. Breg tag should be at the bottom of the sleeve, closest to the hand.

Inserte el brazo en la manga. Asegúrese de que la costura se centre en el interior del brazo. La etiqueta de Breg debe encontrarse en la parte inferior de la manga, cerca de la mano.

Insérez le bras dans le support en centrant la couture à l'intérieur du bras. Le logo Breg devrait être au bas du support, près de la main.

2

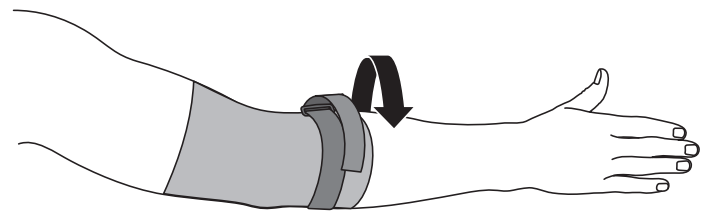

For **Elbow Sleeve with Compression Strap**, feed strap through d-ring and tighten for added compression.

En el caso de **la manga con correa de compresión**, pase la correa a través del anillo en D y apriete para lograr mayor compresión

Pour **le support à coude avec la courroie de compression**, insérez la courroie par l'anneau en D et serrez pour comprimer.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

