




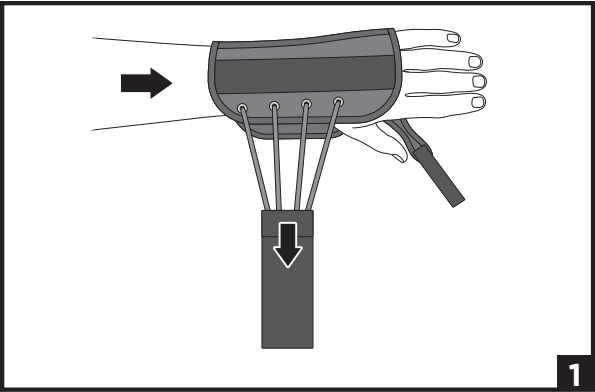

1

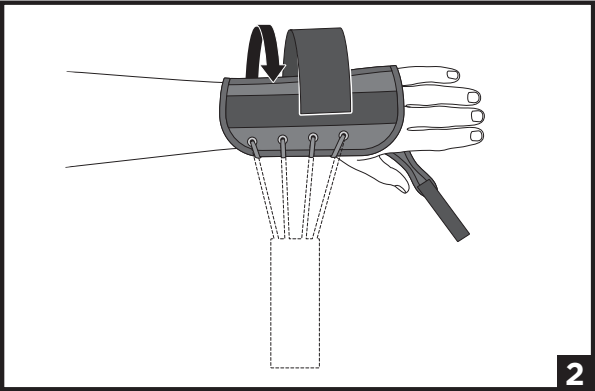

2

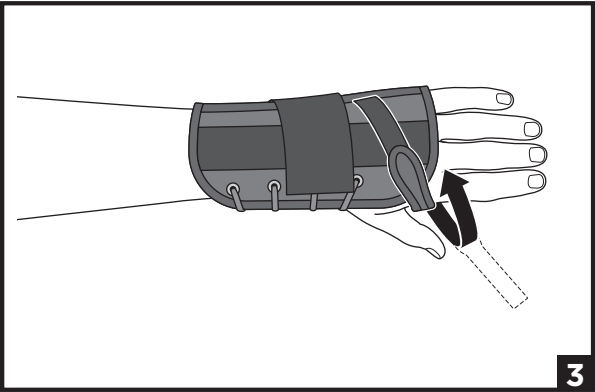

3

## ENGLISH

### INTENDED USE/INDICATIONS:

The intended use for wrist bracing products is to provide support and / or immobilization to the wrist for patients with wrist injury.

### INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

### CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

### ⚠ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- For single patient use only.

### INSTRUCTIONS FOR USE:

Example illustrates left hand brace application.

1. Slide hand into the brace and pull hook strap to tighten brace.
2. Wrap strap around the brace, and secure to the loop closure.
3. Line up the palmar stay below the middle crease of the hand and secure the thumb strap. Adjust for comfort.

### USE AND CARE:

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

### MATERIAL CONTENT:

Aluminum, Brass, Cotton, Nylon, Polyester, Polypropylene.

### WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see [www.breg.com](http://www.breg.com)

### DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

## FRANÇAIS

### UTILISATION/INDICATIONS :

L'utilisation prévue des produits de maintien du poignet est de soutenir et/ou d'immobiliser le poignet pour les patients souffrant d'une blessure au poignet.

### UTILISATEURS VISÉS :

L'utilisateur visé doit être un professionnel agréé, le patient ou un soignant. L'utilisateur doit pouvoir lire, comprendre et être physiquement capable de suivre toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans les informations d'utilisation.

### CONTRE-INDICATIONS :

Sans objet.

### ⚠ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.
- En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
- Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.
- À utiliser pour un seul patient.

### MODE D'EMPLOI :

L'exemple illustre l'installation de l'appareil orthopédique sur le bras gauche.

1. Glissez la main dans l'attelle et serrez en tirant sur la courroie à crochet.
2. Enroulez la courroie autour de l'attelle et attachez-la à la fermeture en boucle.
3. Alignez le support palmaire sous la ligne centrale de la main et fixez la courroie du pouce. Ajustez selon votre confort.

### UTILISATION ET ENTRETIEN :

Lavez à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincez soigneusement. Rincez et laissez sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

### MATÉRIAUX :

Aluminium, laiton, coton, nylon, polyester, polypropylène.

### GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter [www.breg.com](http://www.breg.com)

### MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut en conformité avec les règles locales.

## ESPAÑOL

### USO INDICADO/INDICACIONES:

Los productos de férulas para la muñeca están diseñados para brindar apoyo y / o inmovilización a la muñeca para pacientes con lesiones en la muñeca.

### USUARIOS PREVISTOS:

Este producto está indicado para aquellos profesionales autorizados, pacientes o cuidadores de pacientes. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones detalladas en las instrucciones de uso, además de contar con la capacidad física para seguirlas.

### CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

### ⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.
- Para uso en un solo paciente.

### INSTRUCCIONES DE USO:

El ejemplo muestra el uso de la órtesis en la mano izquierda.

1. Deslice la mano en la férula y tire del gancho de la correa para ajustarla.
2. Envuelva la correa alrededor de la férula y fíjela al cierre del lazo.
3. Alinee el soporte palmar debajo de la línea media de la mano y fije la correa del pulgar. Ajuste hasta una posición que resulte cómoda.

### USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

### MATERIALES:

Aluminio, latón, algodón, nailon, poliéster, polipropileno.

### GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite [www.breg.com](http://www.breg.com)

### ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.



## Low Profile Wrist

Support de Poignet Discret

Férula para Muñeca de Perfil Bajo

