

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.



Universal Hinged Lateral Stabilizer Instructions for Use Estabilizador lateral articulado universal Instrucciones de uso Stabilisateur latéral articulé universel Notice d'utilisation



2885 Loker Ave East
Carlsbad, CA 92010 USA
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Local: +1-760-795-5440
Fax: +1-760-795-5295
www.breg.com




E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

© 2017 Breg, Inc. All rights reserved.

UNIVERSAL HINGED LATERAL STABILIZER

1

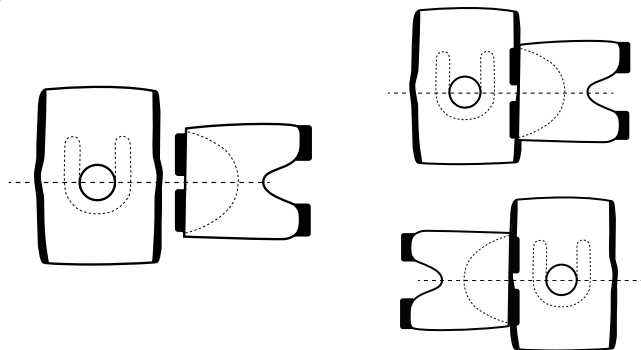

1. Apply Knee Sleeve

Grasp edges of the sleeve at the larger opening. Step through sleeve, pulling it up to the knee so the opening is centered on knee cap. Then affix strap to brace.

*This brace can be used on either leg.

1. Colocar la rodillera

Tomar los bordes de la rodillera por la abertura más grande. Pasar la pierna a través de la rodillera, jalándola hasta la rodilla de modo que la abertura quede centrada con respecto a la rótula. Entonces fije la correa a la férula.


*Está férula se puede usar en cualquiera de las piernas.

1. Posez la genouillère

Saisissez les bords du manchon par la plus grande ouverture. Passez la jambe par le manchon, en tirant vers le haut jusqu'à ce que l'ouverture pour le genou soit au centre de la rotule. Ensuite, attachez la sangle à l'orthèse.

*Cette orthèse convient aux deux jambes.

2

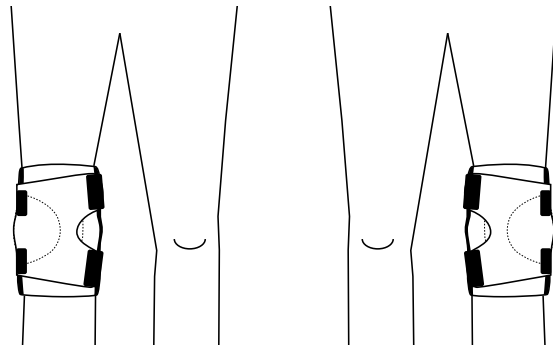

2. Secure Straps

First pull lower strap to attach, then pull upper strap to attach. Fit should be snug, but not too tight so as to restrict circulation.

2. Asegurar las correas

Primero tirar de la correa inferior para ajustarla, luego tirar de la correa superior para ajustarla. El ajuste debe ser apretado, pero no demasiado ajustado como para restringir la circulación.

2. Attache des sangles

Tirez sur les sangles pour les fixer, en commençant par celle du bas. Ajustez correctement, sans trop serrer pour éviter de restreindre la circulation.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

