

DEUTSCHE ANLEITUNGEN

⚠️ WARNHINWEISE

WARNUNG: VOR DER NUTZUNG DER ORTHESE DIE ANLEITUNG ZUR KORREKTEN ANLEGUNG UND DIE WARNHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN. BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, UM EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTIONSWEISE DER ORTHESE SICHERZUSTELLEN.

WARNUNG: WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN IHREN ARZT/THERAPEUTEN, FALLS BEI IHNEN BEI DER ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMEHRTE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN, HAUTREIZUNGEN ODER ANDERE UNGEWÖHNLICHE REAKTIONEN AUFTRETEN.

WARNUNG: DIESE ORTHESE VERHINDERT ODER REDUZIERT NICHT ALLE MÖGLICHEN VERLETZUNGEN. EINE ANGEMESSENE REHABILITATION UND ÄNDERUNG DER AKTIVITÄTEN SIND EBENFALLS BESTANDTEIL EINES SICHEREN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. WENDEN SIE SICH BEZÜGLICH EINES SICHEREN UND ANGEMESSENEN AKTIVITÄTSGRADS WÄHREND DER ANWENDUNG DIESER VORRICHTUNG AN IHREN QUALIFIZIERTEN ARZT/THERAPEUTEN.

ACHTUNG: BEFOLGEN SIE DAS IN DEN ANLEITUNGEN BESCHRIEBENEN ANWENDUNGS- UND BEHANDLUNGSVERFAHREN.

ACHTUNG: NUR ZUM GEBRAUCH BEI EINEM PATIENTEN.




A. Die schnürbare Knöchelorthese ist so konzipiert, dass sie über einer Sportschnecke getragen werden kann. Positionieren Sie die Ferse in der Öffnung an der Rück- und Unterseite der Orthese. Schnüren Sie die Knöchelorthese und ziehen Sie die Schnüre fest zu.

B. Wickeln Sie den inneren (medialen) Gurt über den oberen Teil des Fußes. Führen Sie den Gurt anschließend unter dem Fuß und der Ferse durch. Sichern Sie den Gurt an der Innenseite des Knöchels. Ziehen Sie den Gurt fest, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

C. Wickeln Sie den äußeren (seitlichen) Gurt über den oberen Teil des Fußes. Führen Sie den Gurt anschließend unter dem Fuß und der Ferse durch. Sichern Sie den Gurt an der Außenseite des Knöchels.

PFLEGE- UND WASCHANLEITUNGEN

Von Hand in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel waschen, abspülen und flach liegend an der Luft trocknen lassen.

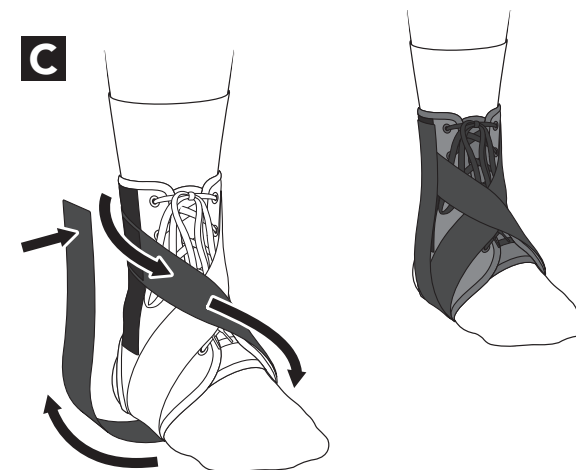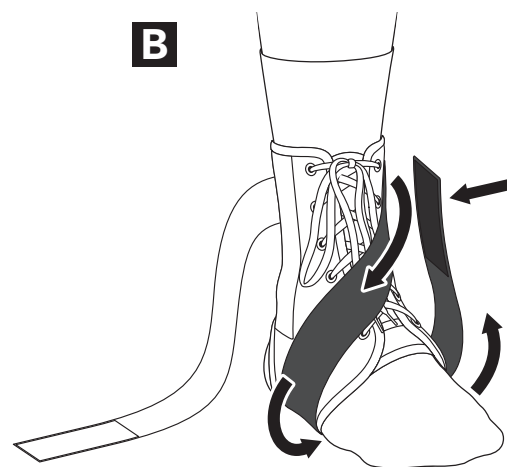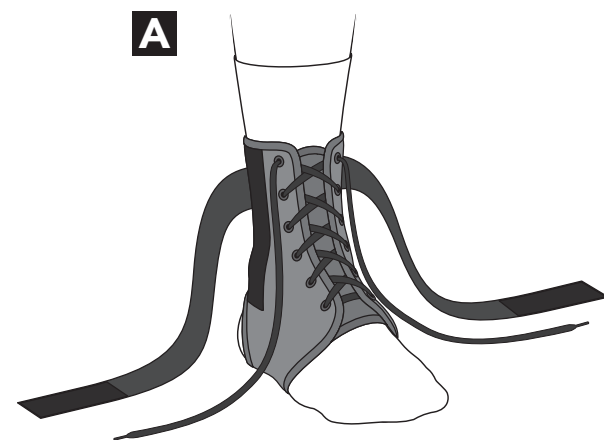

Lace-Up Ankle Brace

FITTING INSTRUCTIONS

GERMAN

SWEDISH

DANISH

FINNISH

NORWEGIAN

ROMANIAN

DUTCH

POLISH

ITALIAN



Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.

P: 800-321-0607

F: 800-329-2734

www.breg.com

©2021 Breg, Inc. All rights reserved.



E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

AW-1.04099 Rev A 01/21

